

# USER GUIDE

# THE COBRA



# RÖDLJUSTERAPI

---

Kombinationen av rött ljus och nära infrarött ljus påverkar kroppen på ett mycket potent sätt då det röda ljuset når en liten bit in i huden, medan det nära infraröda ljuset kan nå kroppen på djupet. Tillsammans ger de en terapeutisk effekt som enbart den ena typen av ljus inte kan på egen hand. The Cobra avger två våglängder, en med rött ljus och en med nära-infrarött ljus. Ljuset påverkar så kallade fotoacceptorer inne i kroppens celler. Detta leder till en rad, för hälsan, gynnsamma effekter. I dagsläget finns tusentals vetenskapliga studier som visar på nyttoeffekter på en rad områden. Några av fördelarna med rödljusterapi inkluderar:



Fysisk prestation



Mental prestation



Ökad syresättning  
av vävnader



Minskning av  
inflammationer



Förbättrad  
återhämtning  
efter träning



Förbättrad  
läkning av skador




Rehabilitering  
efter kirurgi



Ökad produktion  
av kollagen  
och elastin



Reducerad  
porstorlek  
i huden

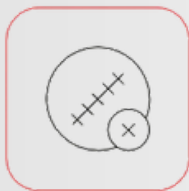

Gynnsam effekt  
på sårhäkning  
och ärr



Smärtlindring



Förbättrade  
mitokondriella  
funktioner

# PRODUKTBESKRIVNING

---

Det bärbara silikonbältet "The Cobra" är ett uppladdningsbart bälte för att flexibelt kunna återhämta och reparera kroppen.

Ytstrukturen på denna produkt är sammansatt av medicinskt silikonmaterial, vilket är bekvämt och lätt att använda.

Den kan användas inte bara på midjan utan även på andra delar av kroppen med justerbara remmar, beroende på ditt behov.

Baserat på teorin om ljusterapi är rött ljus och nära-infrarött ljus mer fördelaktigt för att tränga in i huden, vilket stimulerar kollagen och elastin för att generera celler och förbättra hälsan och funktionen hos våra celler.

## INNEHÅLL



Mått	524 x 152 x 4 mm
Vikt	241 g
Lysdioder	122 st
Laddtid	Ca. 3,5h
Våglängder	Rött 660nm, NIR 850nm
Batterikapacitet	2000mAh
Watt	8W

# FJÄRRKONTROLL

---




# ANVÄNDNING

---


1. Tryck på M-knappen (av/på) och håll in i cirka 3 sekunder för att starta kontrollen. “Power” lampan tänds och “Red” lampan tänds.
2. Tryck på M-knappen igen för att slå på NIR (infrarött ljus), och NIR-lampan lyser. Det finns två lägen tillgängliga, ett är rött ljus, ett annat är rött+NIR-ljus, tryck på M-knappen för att välja.
3. Tryck på vibrationsknappen för att starta vibrationsfunktionen, tänds ett ljus är intensiteten på 1:ans växel, två lampor är intensiteten på 2:ans växel; tre lampor, intensiteten på 3:ans växel ; och tryck sedan ytterligare en gång på vibrationsindikatorn för att stänga av funktionen.
4. Välj ett läge du vill ha, tryck sedan på låsknappen.
5. Kontrollen stängs av automatiskt efter 10 minuter, om du behöver använda den igen, upprepa stegen ovan.
6. Vi rekommenderar att en session pågår 10-20 minuter per dag.

# ANVÄNDNINGSMOMRÅDEN

---

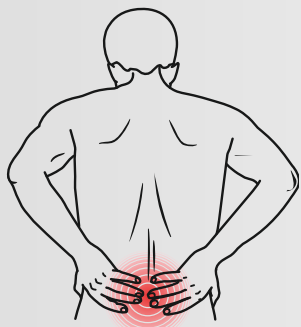


Rygg

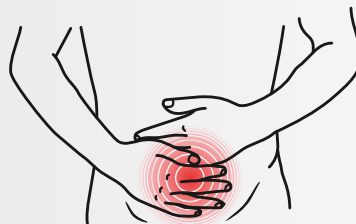

Midja



Nacke

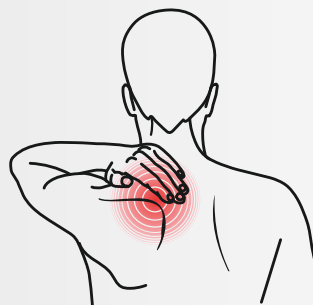

Axlar




Ben





nutrilight

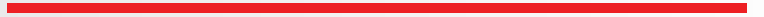

Repairing  
through  
light

